

ニプロセーフティーランセット

再使用禁止

【警告】


1. 感染の危険性があるため、採血前に穿刺部位の消毒を必ず行うこと。
2. 使用後のニプロセーフティーランセットは他の人に触れないように廃棄すること。
3. 本品を穿刺器具本体に装着したまま、放置しないこと。
[針が誤って発射される危険性がある。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。一度使用したニプロセーフティーランセットは必ず廃棄すること。
毎回新しいものを使用すること。
2. 使用時にプロテクションキャップが外れているものは使用しないこと。
3. 本品は、ニプロセーフティーライトショット (穿刺器具) 以外には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、穿刺針 (ムク針)、ホルダー、プロテクションキャップ (ネジ切りキャップ) で構成される。

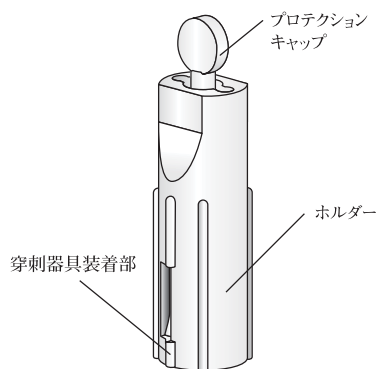

(穿刺針はホルダー中に格納されている)

【使用目的、効能又は効果】

本品は、血糖値測定、血液型判定等に用いる血液試料を指先等から微量に採取することを目的とし、専用の穿刺器に挿入して使用される鋭利な刃先を持つランセットである。
本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【品目仕様等】

穿刺針は、穿刺針の中心軸方向に下記の力を加えたとき、抜けない。

穿刺針の根元外径 (mm)	力 (N)
0.2以上0.5未満	8
0.5以上0.8未満	15

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品のホルダー部分をしっかりと固定し、プロテクションキャップをゆっくりと180度回転させキャップを外します。

2. 本品をニプロセーフティーライトショット (穿刺器具) のニプロセーフティーランセット装着部へ装着します。
3. 穿刺部位をアルコール綿、お湯、石鹸水などで洗い清潔にし、乾燥させます。
4. 穿刺器具本体に装着したニプロセーフティーランセットのホルダー先端を穿刺部位 (指先、手のひら等) に押し当て、穿刺器具本体の穿刺ボタンを押します。
<注意> 採血の際は穿刺部位や穿刺器具を動かさないようにしてください。
5. 穿刺後、穿刺器具本体の横側にあるスライドボタンをゆっくり下にスライドさせ、使用後の本品を取り外します。
<注意> 感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

<使用方法に関連する使用上の注意>

1. 使用時にプロテクションキャップが既に外れているものや、清潔でないものは使用しないでください。
2. ニプロセーフティーライトショットへの装着は確実に奥まで差し込んでください。
3. 使用後の本品は医療機関等に相談して処理してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

1. 取り付けて使用する穿刺器具の添付文書・取扱説明書を参照すること。
2. 包装が破損、汚損している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
3. 使用前に本品のホルダーから針先が出た状態の場合は、その製品を使用しないこと。
4. 使用後に本品のホルダーから針先が出ていないことを確認すること。
5. 前腕などからの採血で血糖測定を行うことは可能であるが、低血糖の兆候や症状があらわれた場合は指先からの採血をすること。
- *6. 耳朶等の組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えないこと。[組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染のおそれがある。貫通のおそれがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討すること。]
- *7. 分解・修理・改造はしないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間・使用の期限
外箱の使用期限欄を参照のこと (自己認証による)。

【包装】

25、30本/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売 (お問い合わせ先)

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号

電話番号:06-6372-2331 (代表)

フリーダイヤル:0120-834-226 (電話番号をよくお確かめの上、
おかけ頂きますようお願い致します。)
9:00~17:30 (土・日・祝祭日をのぞく)

製造 (輸入先)

EUMED Biotechnology Co., Ltd.

台湾

[Taiwan]